

BLACK-FIRE*



Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe


DOPPELFUNKTIONS- HANDSCHUH

Als Ersthelfer erfüllen Sie mehr als eine Funktion. Ihre Handschuhe jetzt auch. Der neue BLACK-FIRE* Nitril-Untersuchungshandschuh dient Ihnen als Schutz bei Ihrer Arbeit am Patienten, als Signalkleidung bei der Umleitung von Verkehr - und kann Ihnen sogar gefährliche Risse im Handschuh aufzeigen.



Doppelseitig

Der BLACK-FIRE* Handschuh kann mit der schwarzen Seite oder mit der orangefarbenen Signalseite nach außen getragen werden, wenn Verkehr umgeleitet oder bei schlechter Sicht gearbeitet werden muss.

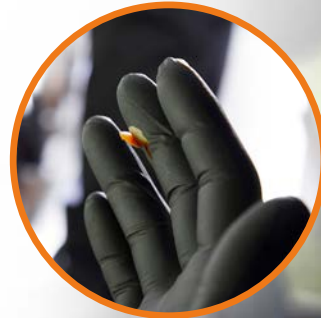

Defektsichtbarkeit

Mit der geschützten QUICK CHECK* Technologie lassen sich Defekte wie Risse und Schnitte im Schutzhandschuh schnell erkennen.

Rettungsdienste müssen auf jede Situation vorbereitet sein. Die innovativen BLACK-FIRE* Handschuhe von Halyard unterstützen Sie bei der Arbeit und bieten Ihnen durch ihre Doppelfunktion den Schutz, den Sie benötigen.



NEU!

BLACK-FIRE*

Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe

BLACK-FIRE* NITRIL- UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE ERHÖHEN IHREN SCHUTZ UND IHRE SICHERHEIT

- Patentierte Nitril-Zusammensetzung für höheren Tragekomfort und höhere Widerstandsfähigkeit
- Naturlatexfrei

Zwei Handschuhe in einem



BLACK-FIRE* Doppelfunktions-Handschuhe können in Situationen, die eine hohe Sichtbarkeit erfordern, mit der leuchtend orangefarbenen Seite nach außen getragen werden.

QUICK CHECK* Technologie



Durch ihre leuchtend orangefarbene Innenschicht können bei den BLACK-FIRE* Handschuhen mit geschützter QUICK CHECK* Technologie Defekte wie Risse schnell entdeckt werden.

Achtung: Diese Untersuchungshandschuhe schützen nicht vor Hitze oder Feuer. Nicht im Bereich von Feuer, Flammen und anderen Hitzequellen verwenden.



KNOWLEDGE NETWORK* Klinische Fortbildung

Kompetenter Kundenservice

Fachkundige Verkaufsmitarbeiter

Hilfsmittel & optimale Verfahren

Klinische Forschung

Streben nach Perfektion

BLACK-FIRE* Nitril-Untersuchungshandschuhen

Artikel	Größe	Verpackung
45256	XS	150 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton
45257	S	150 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton
45258	M	150 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton
45259	L	150 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton
45260	XL	140 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton

Produktspezifikationen

Maße Dicke*	mm
Mittelfinger:	0,14
Handfläche:	0,10
Bund:	0,09
Durchschnittliche Länge:	> 242mm

* bei einem Handschuh mittleren Gewichts

Physikalische Eigenschaften

Vor Alterung	
Mittlere Reißkraft bei Versagen:	9 N
Maximale Dehnung:	650%
Nach Alterung	
Mittlere Reißkraft bei Versagen:	11 N
Maximale Dehnung:	550%

Qualitätsstandards

Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen gemäß Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Produktklasse: I

Entspricht EN 455, EN 374 & EN 420.

PSA Kat. III und freigegeben für den Umgang mit Lebensmitteln.

Hergestellt entsprechend den Qualitätsanforderungen der ISO 13485 und ISO 9001

AQL - EN455-1

Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL)

1,0

Patent angemeldet

Weitere Informationen über BLACK-FIRE* Handschuhe erhalten Sie unter www.halyardhealth.de

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Halyard Kundendienst:

Tel.: 0800 180 22 98

Fax: 0800 180 22 97

kundendienst@hyh.com